

SiteCare Nurse Manual

SiteCare 看護師向け操作ガイド

Use this guide from patient selection to review of past records.
患者の選択から過去記録の確認まで、順番に操作します。

1 Open SiteCare and sign in with your own username and password.

1 SiteCare を開き、自分のユーザー名とパスワードでログインします。

2 Select 日本語 / EN. Check the date at the top of the screen.

2 日本語 / EN で言語を選び、画面上部の日時を確認します。

3 Open Patients. Search by patient ID or name, then select the patient.

3 「患者一覧」で患者 ID・名前を検索し、対象の患者を開きます。



The usual order / 通常の操作順

Main menus 主なメニュー

Menu / メニュー	Use / 使い方
Overview ホーム	Check visits, recent activity and site availability. 予定・最近の記録・部位の状態を確認します。
Patients 患者一覧	Open a patient, or use Create Patient to register one. 患者を開く、または「患者を登録」で追加します。
Appointments 予約カレンダー	Review, confirm or change the next visit. 次回予定を確認・確定・変更します。
Patient Record 患者記録	View dosage graphs, skin observations and past photos. 投与速度・皮膚所見・過去の写真を確認します。
Audit Trail [Admin] 監査ログ [管理者]	Open the patient ID and View Changes to review changes. 患者 ID と「変更内容」から変更履歴を確認します。
Settings & Data 設定・データ	Read storage information. Admin manages accounts and backups. 保存方法を確認します。アカウントとバックアップは管理者が扱います。
Workflow Guide 使い方ガイド	Open the in-app instructions when you need help. 操作に迷ったときは、画面内の説明を開きます。

Prototype for training and evaluation. Use synthetic or de-identified data.


研修・評価用の試作版です。架空または匿名化したデータを使用します。

Closing the browser does not stop the server. Ask the operator to stop it with Ctrl+C when finished.

ブラウザを閉じててもサーバーは停止しません。終了時は担当者に Ctrl+C での停止を依頼します。

1 Prepare the photo and site map

写真と部位マップを準備する

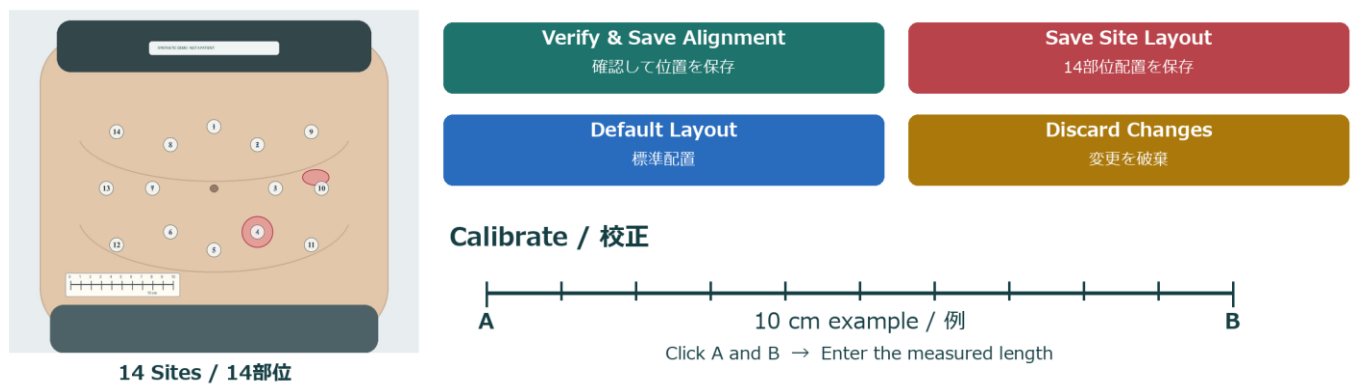

Synthetic example and button colours / 模式図とボタンの色

1 New Visit Photo: choose a JPEG or PNG. Check the patient and capture time.

1 「今回の写真を追加」で JPEG・PNG を選び、患者と撮影日時を確認します。

Include the navel and a measured ruler. Confirm image permission, then Upload Photo.
臍と定規が写った写真を使い、利用許可にチェックして「写真を追加」を押します。

2 Navel: click the navel. Use Move Photo, Photo Size and Photo Rotation to align.

2 「臍」で臍の中心をクリックし、写真移動・写真サイズ・写真回転で合わせます。

3 Calibrate: click two ruler marks. Enter their real distance in cm.

3 「校正」で定規の2点をクリックし、実際の長さを cm で入力します。

4 Verify & Save Alignment: check the image and save the calibration.

4 「確認して位置を保存」で、画像を確認して校正結果を保存します。

5 Edit Sites: drag the numbered circles. Save with the red Save Site Layout button.

5 「14 部位調整」で番号をドラッグし、赤い「14 部位配置を保存」を押します。

Default Layout restores and saves the original positions. Discard Changes removes unsaved edits.

青い「標準配置」は元の配置に戻して保存します。黄色の「変更を破棄」は未保存の編集を取り消します。

Pan View moves the view. + / - zooms. Reset View restores it. Photo changes image opacity.

「表示移動」で画面を移動し、+ / - で拡大・縮小します。「表示リセット」で戻し、「写真」で濃さを変えます。

Keep Calibration 校正を保持

On by default for nurses and admins. A verified photo can be reused after 24 hours.

看護師・管理者とも初期設定はオンです。確認済み写真を 24 時間後も再利用できます。

Off: use a new photo after 24 hours or after a completed procedure. New photos always need calibration.

オフ：撮影後 24 時間を超えた場合、または実施記録に使用済みの場合は新しい写真を使います。新規写真は毎回校正します。

This setting is shared. Saved records lock their photo layout. Upload a new photo to edit again.

この設定は全員で共有します。記録に使用した写真の配置は固定されるため、再編集には新しい写真を追加します。

2 Check the skin and record an alert

皮膚を確認し注意領域を記録する

Actual Controls / 操作画面

Width: Horizontal X Axis (cm)

Height: Vertical Y Axis (cm)

0.30

0.30

Draw Spot

0.30 × 0.30 cm

Circle Or Ellipse / 円・楕円

X = Y

X ≠ Y

Click the centre / 中心をクリック

Full width and height / 幅と高さの全長

Width X and height Y are full dimensions in cm / X と Y は幅・高さの全長です

1 Choose Draw Alert, then click the centre of the spot on the photo.

1 「注意領域」を選び、写真上で所見の中心をクリックします。

2 Enter Width X and Height Y. Both start at 0.30 cm.

2 幅 X と高さ Y を入力します。初期値はどちらも 0.30 cm です。

Height follows width until you edit height. Equal values make a circle; different values make an ellipse.
高さを個別に編集するまでは幅に連動します。同じ値は円、異なる値は楕円になります。

3 Or select blue Draw Spot. Drag from one corner to the opposite corner of the spot.

3 または青い「マウスで描画」を選び、所見を囲む角から反対の角までドラッグします。

The width and height are filled automatically. Check the shape before saving.
幅と高さが自動入力されます。保存前に形を確認します。

4 Select all observations, severity, observation time and a short note. Select Save Alert.

4 所見・程度・観察日時・短いメモを入力し、「注意領域を保存」を押します。

Choices: Redness, Hardening, Pain, Tenderness, Swelling, Bruising, Leakage, Other / Avoid Area.
選択肢：発赤・硬結・痛み・圧痛・腫れ・皮下出血・漏れ・その他／避ける領域。痛みと圧痛は別項目です。

Read the site colours 部位の色を確認する

Colour / 色	Meaning / 意味
Green / 緑	Eligible: configured checks passed; assess the actual skin. 条件適合：設定条件を満たしています。実際の皮膚を確認します。
Blue / 青	12-Day Rest: check the remaining time. 12 日間の休止：残り時間を確認します。
Red / 赤	Blocked: review the reason shown. 使用不可：表示された理由を確認します。
Gray / 灰	Unverified: check photo calibration and alignment. 未確認：写真の校正と位置合わせを確認します。

5 After recovery is confirmed, open Skin Alerts → Confirm Full Recovery. Enter the assessment and save.

5 回復を確認したら「皮膚所見 → 完全回復を確認」で評価を入力し、保存します。

That alert clears immediately. Other alerts, rest periods and distance checks may still block the site.
その所見の制限は直ちに解除されます。他の所見・休止期間・距離による制限は残る場合があります。

3 Set dosage and the next appointment

投与速度と次回予約を設定する

☐ Higher / 高用量

☒ Standard / 標準

☐ Lower / 低用量

Drug Dosage Amount / 投与速度

0.15 mL/h

Increased / 増量

Decreased / 減量

Step / 増減幅

0.01 mL/h

Unchanged / 変更なし

Initial values and change colours / 初期値と増減の表示色

1 Open Drug Dosage. Choose one category: Higher, Standard or Lower.

1 「投与速度」を開き、高用量・標準・低用量から1つ選びます。

2 Enter the rate in mL/h. Use - / + to change it by the Step value.

2 速度を mL/h で入力します。-/ + を押すと「増減幅」の分だけ変わります。

Initial rate: 0.15 mL/h. Initial step: 0.01 mL/h. Enter only the instructed rate.

初期速度は 0.15 mL/h、初期増減幅は 0.01 mL/h です。指示された速度を入力します。

3 Check Increased, Decreased or Unchanged. Give a reason for an increase or decrease.

3 増量・減量・変更なしを確認します。増量・減量のときは理由を入力します。

4 Save Dosage Preset. It becomes a record only when the completed puncture is saved.

4 「投与速度設定を保存」を押します。穿刺を保存した時点で正式な記録になります。

Each patient has separate settings. The latest puncture supplies the next default rate.

設定は患者ごとに保存します。最新の穿刺で記録した速度が次回の初期値になります。

Appointment 予約

Count Days / 日数で指定

3 days / 3日

OR / または

Assign Days From Week / 曜日で指定

☒ Mon 月

☐ Tue 火

☐ Wed 水

☐ Thu 木

☒ Fri 金

☐ Sat 土

☐ Sun 日

Choose one method only / 方法はどちらか1つを選びます

5 Open Appointment. Choose Count Days or Assign Days From Week.

5 「予約」を開き、「日数で指定」または「曜日で指定」を選びます。

Count Days: enter days after the last puncture; the default is 3. Weekdays: select one or more days.

日数指定：前回穿刺からの日数を入力します（初期値3日）。曜日指定：曜日を1つ以上選びます。

6 Save. Only the next visit is suggested. Open Appointments to Confirm / Change its time.

6 保存すると次回1件だけを提案します。「予約カレンダー」の「確認・変更」で日時を確定します。

Weekdays use the next selected day after puncture. Before the first puncture, the initial appointment is used.

曜日指定は穿刺日の翌日以降の選択曜日を使います。初回穿刺前は登録した初回予定日が基準です。

Saving a new rule replaces the existing suggestion or confirmation. Check the calendar again.

予約方法を保存すると、既存の提案・確定予約が置き換わります。カレンダーを再確認します。

4 Record a puncture and review dosage

穿刺を記録し投与速度を確認する

Record Completed Puncture

実施済みの穿刺を記録

Save Puncture Record

穿刺記録を保存

☒ Confirm the patient ID before saving.
保存前に患者IDと記録の一致を確認します。

1 Select a candidate, a map number or a Site Status row. Use Inspect to read its details.

1 候補・写真の番号・部位状態の行を選び、「部位確認」で詳細を確認します。

2 Use Exact Point to mark the actual location. Assess the patient and skin before proceeding.

2 「実際の点」で実際の位置を指定します。患者と皮膚の状態を確認します。

3 After the puncture, open Record Completed Puncture. Check category, rate, change status and actual time.


3 実施後に「実施済みの穿刺を記録」を開き、区分・速度・増減・実施日時を確認します。

4 Add a note if needed. Tick the patient identity check and select Save Puncture Record.

4 必要なメモを入力し、本人確認にチェックして「穿刺記録を保存」を押します。

History shows saved entries. For an older completed puncture, use Add Historical Record and explain the source. 保存結果は「穿刺履歴」で確認します。過去の実施分は「過去の記録を追加」を使い、情報源を説明します。

Patient Record 患者記録

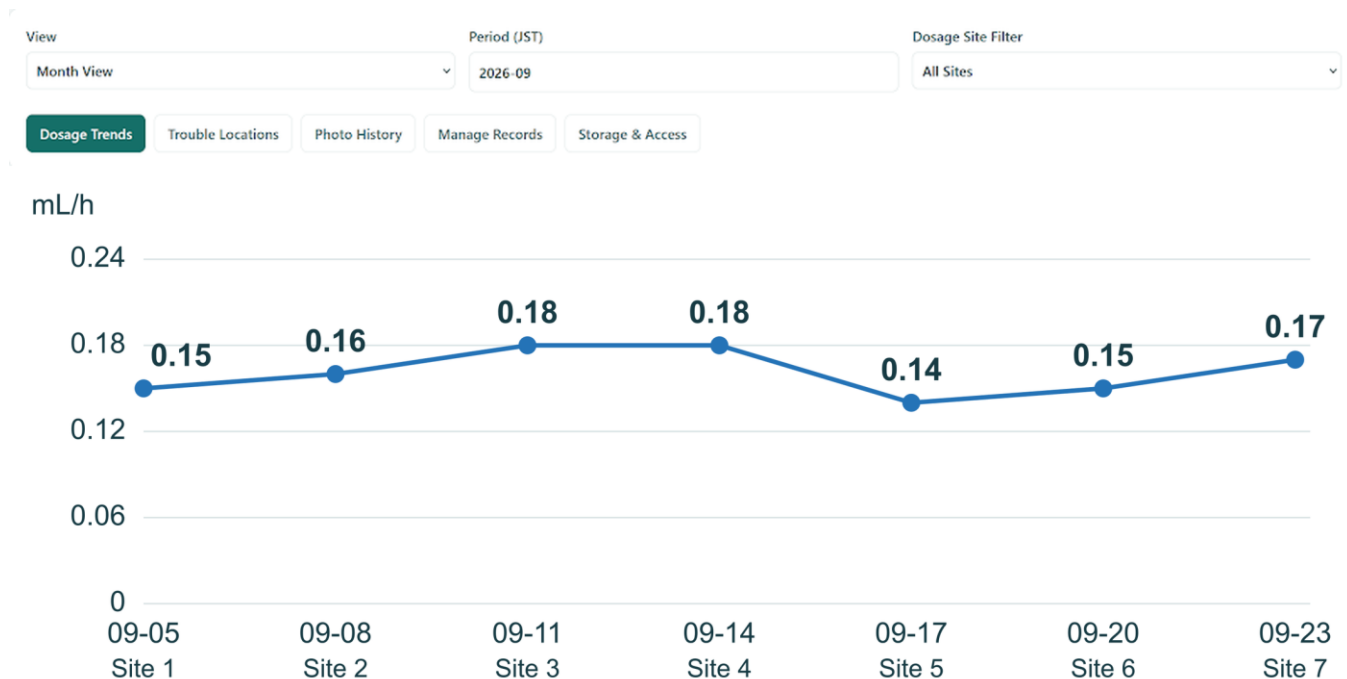

Report controls and example flow rates / 表示条件と投与速度の例

5 Open Patient Record → Open Record. Choose the view, period and All Sites or a site from 1–14.

5 「患者記録 → 記録を開く」で、表示期間・対象月や年・全部位または部位 1～14 を選びます。

Month View shows each puncture. Year View shows monthly averages. Total View shows yearly averages. 月表示は穿刺ごとの値、年表示は月ごとの平均、全期間は年ごとの平均を表示します。

Read values beside the graph points and in Graph Values / Site-Wise Summary. Scroll sideways if needed. 点の数値と「グラフの数値／部位別の集計」を確認します。必要に応じて横にスクロールします。

mL/h is a flow rate, not the delivered volume. Missing historical values remain Not Recorded.

mL/h は投与速度であり、投与済みの液量ではありません。不明な過去の値は「未記録」のままです。

5 Review history and finish safely

履歴を確認して操作を終える



Retained photo and recorded alert counts / 保存写真と所見の記録件数

1 Trouble Locations: choose Month, Year or Total. Compare the counts for all 14 sites.

1 「皮膚の問題部位」で月・年・全期間を選び、全 14 部位の件数を比較します。

Each saved alert counts once at its nearest site. Recovered alerts stay counted; deleted entries are excluded.
所見 1 件を最も近い部位で 1 件と数えます。回復済みも含み、削除済みは除きます。

2 Photo History: select a date and photo. Select Show Historical Photo to see active red areas.

2 「写真履歴」で日時と写真を選び、「履歴写真を表示」を押します。赤色は当時の未回復領域です。

Photo numbers #1, #2... belong to each patient. Source Photo opens the image linked to a record.
写真番号#1、#2...は患者ごとに数えます。「記録写真」で各記録の元画像を開けます。

3 Manage Records shows entries and corrections. Storage & Access explains how records are kept.

3 「記録管理」で記録と修正履歴を確認し、「保存とアクセス」で保存方法を確認します。

Management options 管理メニュー

Action / 操作	What happens / 内容
Edit / Delete [Admin] 編集・削除 [管理者]	Give a reason; history stays. Only unused photos can be deleted. 理由を入力し、履歴は残します。写真削除は未使用のものだけです。
View Changes 変更内容	Read before/after values. Include Deleted Entries shows removed records. 修正前後を確認します。「削除済みを含める」で削除記録を表示します。
Profile / Delete Patient プロフィール／患者を削除	Edit active status in Profile. Only admins can permanently delete patients. 管理中・終了を変更できます。患者の完全削除は管理者のみです。
Nurse Accounts [Admin] 記録者アカウント [管理者]	Settings & Data → Add User / Delete Nurse. Old records remain. 設定・データで追加・削除します。削除後も既存の記録は残ります。
Backup / CSV / Demo バックアップ／CSV／デモ	Admin downloads full backups and opens demo data. CSV exports record rows. 完全バックアップ・デモは管理者が扱います。CSV は記録表の出力です。
Change Date [Admin] 日時を変更 [管理者]	Demo date affects everyone. Choose Use System Date to return. デモ日時は全員に反映します。「システム日時を使用」で戻します。

Records stay on this computer. CSV is not a full backup. Ask an admin to back up or restore data.
記録はこの PC に保存します。CSV は完全バックアップではありません。保存・復元は管理者に依頼します。

Finish saving, then Sign Out. If controls are unavailable, check the latest photo, calibration and stated reason.
保存を確認してログアウトします。操作できない場合は、最新写真・校正・表示された理由を確認します。